

Sofia bleue



Code article : **1020042S1**

Code ACL : 3401542608155

Famille :

Aides à la marche

Description :

Canne anglaise, réglable en hauteur, mât et rallonge époxy bleu

- . haut de Sofia noir,
- . embout Optiflex noir

Usage revendiqué :

Aide à la marche manipulée avec un bras

Classe du dispositif : I

Garantie produit :

2 ans contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur mini sol / poignée* : 710 mm
- Hauteur maxi sol / poignée* : 985 mm

→ plage de réglage : 275 mm (tous les 25 mm)

* position médiane sur poignée

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 20g

Description technique

- **Mât époxy bleu**: tube en aluminium Ø 22,5x1 L=570 (roulé soudé-5086) 3 positions de réglage
- **Rallonge époxy bleu**: tube en aluminium Ø 20x1 L=490 (roulé soudé-5086) finition époxy - 4 positions de réglage
- **Haut de canne Sofia noir** en polypropylène
- **Bague anti-jeu noire** entre mât et rallonge
- Embout anti-bruit
- Blocage réglage en hauteur de la rallonge par clip Ø 22,5 noir
- **Embout Optiflex noir**
- Emballage par paire en **pochette Vilgo 300x1250**

Poids du produit :

0,44 kg

Date de 1ère mise sur le marché : **Déc. 2002**


version mise sur le marché à partir de: **mars 2016**

Etiquetage produit

Vignette de remboursement



Vignette CE

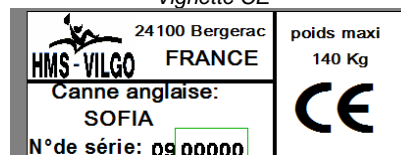

Sofia bleue



Liste des pièces :

N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A102032	1	Haut de sofia noir
2	E102036	1	Mât époxy bleu (tube alu Ø22.5x1- L=570 – 3 trous)
3	A000126	1	Clip de 22.5 noir
4	A000002	1	Bague diam. 22.5 noire
5	E102037	1	Rallonge époxy bleu (tube alu Ø20x1- L=490 – 4 trous)
6	A000134	1	Embout anti bruit
7	A102069	1	Embout Optiflex noir

