

# axtair automorpho® plus



Score sur l'Echelle de Braden



COMPATIBLE  
PROGRAMME  
**Aircare®**



INSCRIT  
À LA LPP

## (SUR) MATELAS

- ▶ 18 cellules en Polyuréthane Ether indépendantes et amovibles de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique.
  - Zone tête : 2 cellules statiques recouvertes d'un oreiller.
- ▶ Support en mousse polyéther de + de 5 cm d'épaisseur situé dans un compartiment indépendant.
- ▶ 4 cellules talons avec décharge indépendante.
- ▶ Vanne CPR.
- ▶ Bouchon de transport avec système de mise en commun des 2 voies (autonomie de 8 heures).
- ▶ Passe câble en option.




## HOUSSES DISPONIBLES

- ▶ Face supérieure: bi-élastique, imperméable aux liquides et perméable à la vapeur d'eau.
- ▶ Face inférieure: base anti-dérapante.
- ▶ 2 housses disponibles:
  - **PROMUST PU HD** (housse noire)
  - **PROMUST CIC** (housse bleue) dotée d'un traitement anti-bactérien aux ions argent.

## COMPRESSEUR

- ▶ Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage.
  - ▶ 3 modes de fonctionnement: dynamique, statique basse pression, soins..
    - ▶ Réglage confort quel que soit le mode utilisé et la position du patient.
    - ▶ Alarmes visuelle et sonore.
    - ▶ QR code pour un accès rapide aux informations produits (N° de série, fiche produit, notice...)

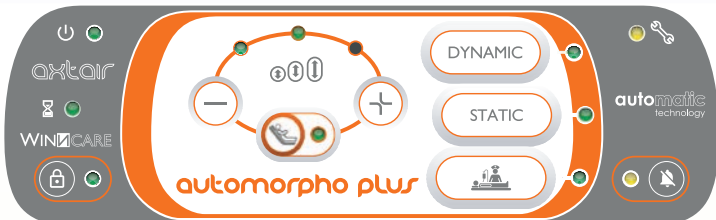

## INDICATIONS

AIDE À LA PRÉVENTION DE L'ESCARRE POUR PATIENT À RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ, LEVÉ DANS LA JOURNÉE, ALITÉ PLUS DE 15 HEURES PAR JOUR.

AIDE AU TRAITEMENT DE L'ESCARRE CONSTITUÉE DE STADE 1 À 4.

POIDS PATIENT : 30 À 165 KG.

## LES + PRODUIT

- ▶ **Efficacité et sécurité thérapeutique** pour le patient.
- ▶ **Simplicité d'utilisation** pour le personnel soignant.
- ▶ Amélioration de la **qualité de soins et de vie** du patient.
- ▶ **Confort d'alitement** avec 3 largeurs disponibles.
- ▶ **Aide au diagnostic technique accessible** par QR code.
- ▶ **Prêt à l'emploi** dans un sac de transport.
- ▶ Démarche d'**éco-conception** respectueuse de l'environnement.
- ▶ **Conçu et fabriqué en France.**

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS / POIDS	POIDS PATIENT	NORMES FEU	CARACTÉRISTIQUES
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (compresseur + surmatelas) Housse intégrale en <b>Promust PU HD</b> Pour lit en largeur 90cm	VAXT4/ AUTO-P	195 x 87x17 cm	30 à 165 Kg	EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 Classe D	<b>(Sur)matelas</b> Vanne CPR d'urgence 18 cellules en Polyuréthane Ether (300 µ) indépendantes et amovibles de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique 2 cellules de tête statiques avec un oreiller confort 4 décharges talonnières de série Support en mousse polyéther amovible de + de 5 cm d'épaisseur situé dans un compartiment indépendant
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (compresseur + surmatelas) Housse intégrale en <b>Promust CIC</b> Pour lit en largeur 90cm	VAXT4/ CIC-P	8kg			
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (compresseur + surmatelas) Housse intégrale en <b>Promust PU HD</b> Pour lit en largeur 100cm	VAXT4/ AUTO100-P	195 x 97x17 cm			
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (compresseur + surmatelas) Housse intégrale en <b>Promust CIC</b> Pour lit en largeur 100cm	VAXT4/ CIC100-P	10kg			<b>Compresseur</b> Dimensions: 22 x 25 x 11.5 cm Poids: 2.7 Kg Mode dynamique (alterné) : 1 cellule sur 2 Temps de cycle complet : 9 à 14 minutes Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage Réglage confort personnalisé Alarmes visuelle et sonore Débit > 7 l / min Alimentation électrique: 220-240 V - 50 Hz Classe II type BF Consommation moyenne : 5 Wh Décibel du compresseur : Pression acoustique suivant NF EN3744 : < 35 dBA Conformité électrique et électromagnétique selon les normes IEC 60601-1 Ed.3; IEC 60601-1-2
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (compresseur + surmatelas) Housse intégrale en <b>Promust PU HD</b> Pour lit en largeur 120cm	VAXT4/ AUTO120-P	195 x 117 x 17 cm			
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (compresseur + surmatelas) Housse intégrale en <b>Promust CIC</b> Pour lit en largeur 120cm	VAXT4/ CIC120-P	12kg			

Entretien : Housses Promust PU HD et CIC



\* Comportement de la tenue du compresseur à la désinfection à une solution de chlore actif à 1% (10 000 ppm) usage discontinu.

Garantie 2 ans

Photos non contractuelles

FP000086/07-2018

WINNOCARE France: Site Askle Santé - 200 rue Charles Tellier - Actiparc de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1 France  
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 - E-mail : contact.askle@winncare.fr - www.winncare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNOCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques  
Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE

