

Une star renaît !

L'**Action³NG** est l'un des meilleurs exemples en terme de compatibilité dans la gamme Invacare. Grâce à sa plate-forme commune avec les autres produits de la gamme **Action**, il peut être facilement réutilisé et adapté aux besoins de l'utilisateur. Son nouveau design attrayant ainsi que ses fonctionnalités améliorées en terme de stabilité et de confort marquent la renaissance du mytique **Action³**.



Yes, you can.®



Fonctionnalité

L'**Action³_{NG}** est doté d'un nouveau croisillon profilé qui permet à la fois d'améliorer la stabilité et la rigidité du fauteuil, mais aussi la fonction pliage et dépliage. Il est également équipé en série d'une toile de dossier réglable en tension et propose ainsi un meilleur confort à l'utilisateur.

Durabilité

Configurable et modulaire, l'**Action³_{NG}** s'adapte parfaitement à l'évolution des besoins de l'utilisateur. Il peut être réutilisé en changeant les options. Le travail de re-design du fauteuil a également permis d'améliorer ses qualités de roulage et la qualité de ses composants. L'utilisateur peut compter sur l'**Action³_{NG}** pour lui faciliter la vie au quotidien.

Transportable

Avec dossier pliant à mi-hauteur, un poids contenu et système de pliage aisé, l'**Action³_{NG}** se transporte facilement dans une petite voiture.

Caractéristiques et options



Toile de dossier bi-matière

Disponible en option, la toile bi-matière offre plus de confort et de rangement pour l'utilisateur grâce à son tissu anti-transpirant et sa pochette arrière.



Frein et extension de frein

Poignée de frein escamotable pour faciliter le transfert.



Repose-jambes à compensation

Réglables en inclinaison de 0° à 80°. Blocage automatique à l'angle souhaité. Appui-mollets réglables en hauteur et en profondeur.



Potences et palettes

Le mécanisme approuvé de l'escamotage intérieur/extérieur des potences est doté d'un mécanisme de démontage rapide.

Caractéristiques et options



Toile de dossier réglable en tension

Améliore le confort et le maintien dorsal.



Dossier pliant à mi-hauteur

Pour faciliter le rangement et le transport du fauteuil en réduisant son encombrement.



20 positions de roues arrière
pour un réglage personnalisé.



Support Amputé

Réglable en profondeur et en hauteur. Potence 80° livrée en plus pour utilisation avec prothèse. Ecarteurs disponibles pour utilisation bilatérale.



Dossier inclinable par vérins à gaz

L'inclinaison du dossier de 0° à 30° peut se faire de manière très précise et avec douceur pour garantir un confort optimal à l'utilisateur.

Caractéristiques et options



Invacare **Action³ NG Positioning**

Permet l'adaptation d'un siège de série modulaire **Pro-tech** ou **Matrx** et assure un positionnement optimal. Le siège est livré monté sur le fauteuil.



Invacare **Action³ NG version Transit**

Propose des roues 12" à l'arrière et des hauteurs d'assise de 485 / 460 / 435 mm. Largeur hors tout = largeur d'assise + 190 mm.



Invacare **Action³ NG Dual HR™**

Système à double main-courante réversible en aluminium à démontage rapide. Deux positions possibles pour la main-courante intérieure. Largeur hors tout = largeur d'assise + 205 mm.



Invacare **Action³ NG**

Commande Unilatérale

Système par levier pendulaire, disponible en hauteurs d'assise 510, 485 et 460 mm.



Invacare **Action³ NG Comfort**

Fauteuil léger configurable de confort. Assise et dossier en confort. Assise et dossier en Dartex. Dossier enveloppant pour un maintien optimal tout en douceur.



NOUVEAU



Roues avant

- ① 6" x 1.1/4" bandage soft.
- ② 6" x 1.1/4" bandage (en standard, existe aussi en 8" x 1.1/4").
- ③ 5,5" x 1.3/4" bandage.
- ④ 8" x 2" pneumatique.

Appui-tête

Nouvelle gamme d'appui-tête avec le choix entre un appui-nuque, un appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables, et un appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables. Nouvelle fixation plus fiable de l'appui-tête.

Caractéristiques et options



Les accoudoirs

① Relevables et amovibles, ② relevables, amovibles et réglables en hauteur. ③. ④ amovibles et réglables en hauteur - Existents tous avec manchettes courtes ou longues. ⑤ Gouttière, ⑥ garde-boue amovible et réglable en hauteur.



Roulette anti-bascule

Pour une sécurité maximale dans les côtes ou avec un dossier incliné.



Tablette transparente

Idéal pour les repas et les activités.



Freins tambours

Facilite le freinage du fauteuil par la tierce-personne.



Porte-cannes

Pour les avoir toujours sous la main.



Roulettes de transfert

En ôtant les roues arrière, la largeur hors tout du fauteuil correspond à la largeur d'assise + 150 mm.










L'Invacare **Action³** NG est compatible avec le **Alber scalamobil**® et vous permet ainsi de monter les escaliers en toute sécurité et simplicité.










Les coussins

- ① **Flo-tech Contour Visco** : mousse viscoélastique, hauteur 90 mm, poids utilisateur maximum 125 kg.
- ② **Flo-tech Lite Visco** : mousse viscoélastique, hauteur 55 mm, poids utilisateur maximum 100 kg. Ces coussins ont une découpe toile d'assise et tubes de dossier.


Données techniques

							
Invacare Action³ NG	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	400 / 430 / 510 mm	200 - 230 - 260 / 240 / 190 - 295 mm	350 - 480 / 340 - 470 mm	80° / 0 - 80°

							
Invacare Action³ NG	7° / 0° à 30°	Largeur d'assise + 190 mm	815 - 1020 mm	1000 mm	720 - 850 mm	285 mm	14,2 kg

			
Invacare Action³ NG	125 kg	7,6 kg (sans roues arrière, accoudoirs et repose-jambes)	Crash testé ISO 7176-19*


Coloris du châssis

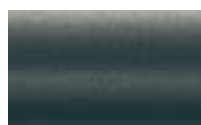

Gris Ardoise



Rouge Brillant

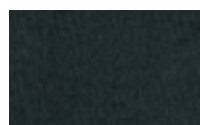

Nylon Noir



Bleu Océan



Noir Brillant



Blanc Perle

Revêtement du siège

INVACARE POIRIER® S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes - France
Tel. : +33 (0) 2 47 62 64 66
Fax : +33 (0) 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

© 2011 Invacare International Sàrl
Tous droits réservés.

Indications données à titre
d'information (information non
contractuelle).
Invacare se réserve le droit de
modifier sans préavis les données
techniques ou de présentations
de ce produit.

Action3NG - FR - 07/2011