


Caractéristiques techniques Forest 3



2x12V-80Ah	2x220W 2x350W	6 km/h 10 km/h	50km 42km	9°	100	1320
------------	------------------	-------------------	--------------	----	-----	------



Compatible iPortal

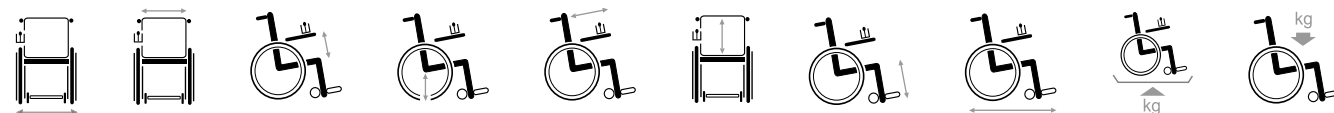

595	400	242-350	430-480	420-520	630	275-395	1185	126	130
610	480	242-350	(sur commande)	420-520	630	275-395	1185	126	130
650	500	242-350		420-520	630	275-395	1185	126	130

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

FOREST 3 en chiffres

- Châssis compact de 59 cm
- Garde au sol de 7,5 cm
- Palonnier avant articulé à débattement de 10 cm
- Hauteur d'assise de 43 ou 48 cm
- Vitesse 6 ou 10 km/h
- Moteurs 220W ou 350W
- Batteries de 80 A/h
- Autonomie de 42 à 50 km

Les +



Eclairage flexible à LED limitant la casse



NOUVEAU système ingénieux de verrouillage et réglage des accoudoirs



Option assistance électronique de trajectoire pour une conduite sûre et efficace

Option
LIFT



Coloris



VERMEIREN France Avelin

Zone Industrielle
5, rue d'Ennevelin
59710 Avelin
Tél.: 03 28 55 07 98
Fax: 03 20 90 28 89
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
Tél.: 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94
info@vermeiren.fr

Visitez aussi notre site: www.vermeiren.fr

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



Information pour les malvoyants est disponible sur demande. - E.R.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique - 01-2015

FOREST F3



VERMEIREN
Pour plus de mobilité



Sous réserve de modifications techniques



Compact, fiable et performant

Le FOREST 3 est le compagnon parfait des utilisateurs exigeant un fauteuil compact pour l'intérieur, et performant en extérieur. Franchissement, Confort et Adaptabilité sont les mots qui caractérisent le mieux l'expérience de conduite FOREST 3.

Franchissement & performance

- 1 Palonnier avant articulé**
permettant de garder les 4 roues au sol malgré des dénivelés allant jusqu'à 10 cm tout en ayant une tenue de route irréprochable.



- 2 Garde au sol de 7,5 cm**

- 3 Amortisseurs arrières, réglables**



- 4 Moteurs puissants de 350 W**
pour la version 10 km/h
(220 W pour version 6 km/h)

Batteries d'origine de 80 A/h

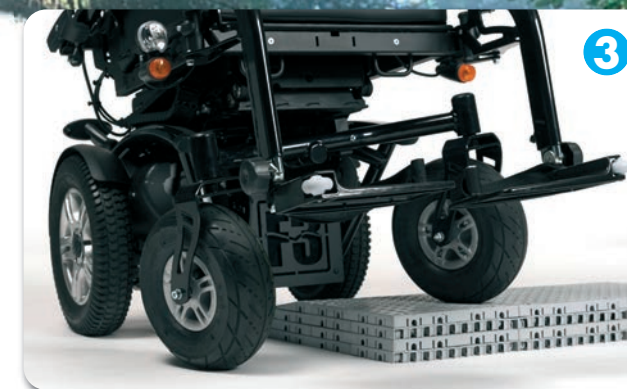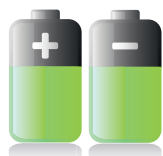

Confort

- 1 Coussins d'assise et de dossier**
post-formés pour un maintien et un confort optimum.
- 2 Bascule électrique**
de l'assise et du dossier.
- 3 Palonnier avant articulé** et système d'amortisseurs permettant d'absorber les chocs pour plus de confort.

Adaptabilité

- 1 Accoudoirs** escamotables et réglables en hauteur, en largeur, en profondeur, et en angle. **NOUVEAU** système ingénieux de verrouillage par une manette simple et ergonomique, avec système de mémorisation de position.



- 2 Manchettes inclinables**
réglables en hauteur et en profondeur.
- 3 NOUVEAU pantographe** offrant un boîtier de commande escamotable intérieur/extérieur de manière simple et efficace.
- 4 Assise réglable** en profondeur par coulissement du dossier.

Son palonnier avant articulé offre un débattement de 10 cm permettant de franchir et absorber les dénivelés des chemins accidentés. L'option correcteur de trajectoire V-STAB technology apporte facilité et précision dans les déplacements en extérieur. L'utilisateur appréciera le confort inégalé du FOREST 3 grâce aux coussins d'assise et de dossier post-formés permettant maintien et confort.