

# Perfecto<sub>2</sub> V



Concentrateur d'oxygène  
5 Litres / 18,2 kg



Le concentrateur d'oxygène **Perfecto<sub>2</sub> V** est conçu pour un traitement en oxygénothérapie jusqu'à 5 L/mn en poste fixe et/ou en déambulation.

## La technologie Invacare

De nouvelles technologies liées au compresseur ont permis de réduire le son de la purge à un niveau quasi imperceptible. Doté de la toute dernière génération de tamis, le **Perfecto<sub>2</sub> V** est plus léger (18,2 kg) tout en conservant des performances en termes de pureté d'oxygène jusqu'à 95,6%.

## Economisons l'énergie

Grâce à une technologie de pointe, le **Perfecto<sub>2</sub> V** consomme peu et optimise les dépenses en matière d'énergie.

Une carte intelligente située au cœur de l'appareil permet de régler les différents systèmes internes de pression. Le concentrateur ne consomme que 320 watts.

## Caractéristiques et options



### Facile à entretenir

Le remplacement du filtre d'admission s'effectue à travers une porte prévue à cet effet.



### Verrouillage du débitmètre Flow Lock

Verrouille le débitmètre afin de prévenir tout changement intempestif du débit. Référence 1580295












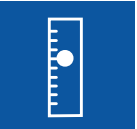







### Débitmètre pédiatrique

Compatible avec toute la gamme des concentrateurs Invacare, il permet de fournir des débits inférieurs à 0,75l/mn (Ref :1522424-IRCPF16AW).






## Caractéristiques techniques

Pour plus d'informations concernant le produit, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation du fabricant Invacare.

	Largeur totale	Profondeur totale	Hauteur totale	Poids	Charger	Consommation électrique	Niveau sonore	Pureté oxygène
<b>Perfecto<sub>2</sub> V</b>	 305 mm	 380 mm	 585 mm	 18.2 kg	 230 V, 50 Hz (±10%)	 320 W	 < 40dB(A) (TÜV certified)	 87 - 96%
<b>Perfecto<sub>2</sub> V</b>	 5 PSI (34.5 kPa ± 10%)	 0.5 - 5.0 LPM	 Up to 2500m	 ISO8359, AMD1		  		

## Technologie SensO2

Concentration d'Oxygène	
	à 85% - Led verte - <b>Normale</b>
	Entre 73% et 85% - Led jaune - <b>Vérifier les filtres et le débit</b>
	< à 73% - Led rouge - <b>Contactez le Service Technique</b>

## Alarmes et Sécurité

- Alarme sans batterie
- Coupe-circuit
- Contrôle SensO2 de la pureté de l'oxygène
- Valve de sécurité compresseur haute pression
- Sécurité haute température
- Alarmes de basse et haute pression
- Fonction auto-diagnostic avec mémoire des codes
- Alarme bas débit

### Document destiné aux professionnels de Santé

- Nom du produit : Invacare PerfectO2V
- Oxygénothérapie à long terme, poste fixe, concentrateur
- Prise en charge par l'assurance maladie en forfaits génériques
- Concentrateur d'oxygène jusqu'à 5l/mn dans le traitement des patients éligibles à une oxygénothérapie à long terme en poste fixe avec une déambulation inférieure à 1 h par jour
- Numéro du document interne : 1567984
- Dispositif médical de Classe IIa

## La prescription

CODE LPPR	Désignation du Forfait 1
1136581	Oxygénothérapie à long terme en poste fixe, OLT 1.00



**Référence produit Perfecto2 V :**  
**1521652-VAW-SUED**

- Organisme notifié CE SGS 0120
- Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE
- Distribué par Invacare
- **IMPORTANT** : Veuillez vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage.